


PCPS 自動記録システム

PCPS Recorder


MTS0920

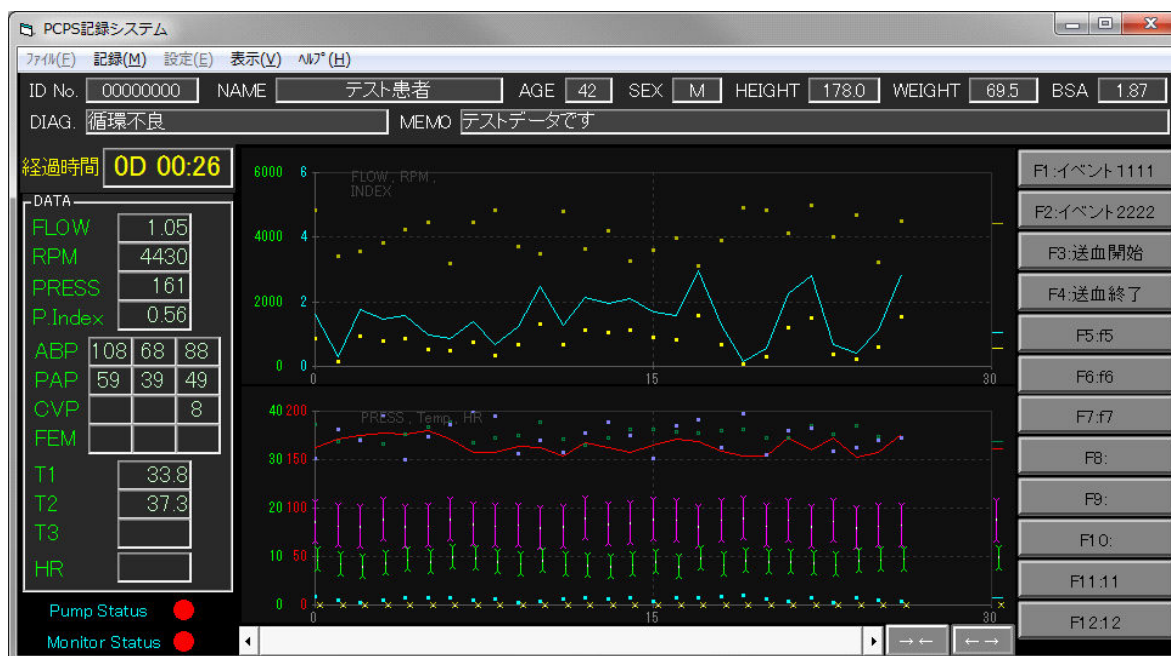

PCPS 中の記録を強力にサポート

- 本製品は、PCPS 中の人工心肺装置の記録を最長 14 日間連続して行うものです。主に人工心肺装置(遠心ポンプ)と生体モニターのデータを記録することができます。
- 記録中は数値表示の他、グラフ表示を行うことができ、数値の変動を視覚的にとらえることができます。
- 記録中にイベントマークを入力することができます。
- グラフ表示の他に数値リスト表示が行えます。

システム構成例

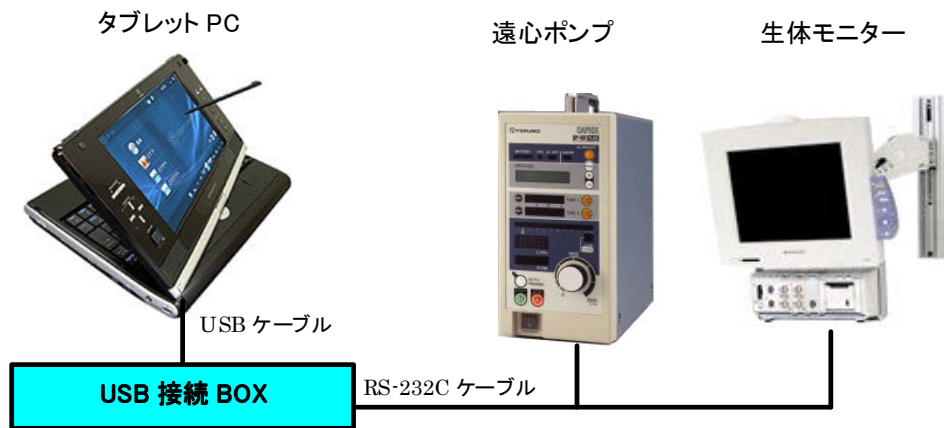

自動記録項目

■ 遠心ポンプ

- 流量、回転数、アラーム情報

■ 生体モニター

- 血圧(4ch)、体温(3ch)、HR

■ 記録時間

- 最長 14 日間(1 分間隔の記録)

パッケージ構成

■ PCPS 記録システム

- PCPS Logger(MTS0920)
- USB-RS232C 変換ケーブル
- USB ハブ
- ノート PC 架台

※別途ノートパソコンが必要です。

動作環境

■ ハードウェア

- PC/AT 互換機
- CPU: Atom1.3GHz 以上
- RAM: 1GB 以上
- 解像度: 1024 × 600 以上
- USB × 1

■ ソフトウェア

- Windows XP / Windows7

※ Microsoft, Windows は、米国 Microsoft 社の米国および、その他の国における登録商標です。

※ その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

#20100406

有限会社メディカルトライシステム <http://www.medical-trys.com>

〒187-0004 東京都小平市天神町 1-32-1 Tel 042-332-6102 Fax 042-332-6103